

# Infrared T RED LIGHT

Red Light  
THERAPY podložka

---

[welldo.cz](http://welldo.cz)

## Vítejte na své Red Light podložce!

Před prvním použitím si prosím přečtěte tento manuál, ve kterém jsou vysvětlené důležité provozní postupy.


Poznámka: Každá LED dioda uvnitř s dvojími čipy na 1 ks 660 nm a 1 ks 850 nm. Blízké infračervené záření 850 nm je pro lidské oko neviditelné.

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b>     | <b>60180</b>                   |
| Jmenovitý výkon  | 576 W                          |
| Skutečný výkon   | 180 W                          |
| Velikost         | 1800 x 600 x 5 mm              |
| Počet LED diod   | 1400 x 0,4 W                   |
| Hmotnost         | 3 kg                           |
| Vlnová délka     | 660 nm : 850 nm = 1:1          |
| EMF              | 0 $\mu$ t                      |
| Intenzita záření | 0 cm: > 100 mW/cm <sup>2</sup> |
| Napětí           | Střídavý proud 100-240 V       |
| Časovač          | 10/20/30 minut                 |
| Teplota          | 42/44/47 °C                    |
| Materiál         | Látka                          |
| Životnost        | Více než 50.000 h              |


Zařízení s červeným světlem využívá kombinované červené 660 nm a infračervené 850 nm LED diody, které jsou vyrobené tak, aby poskytovaly ideální vlnové délky prokázané vědeckými výzkumy v posledních desetiletích.

## Balení obsahuje:

- 1 ks Red Light Therapy Podložka
- 1 ks brýle
- 1 ks ovladač
- 1 ks adaptér
- 1 ks síťový kabel

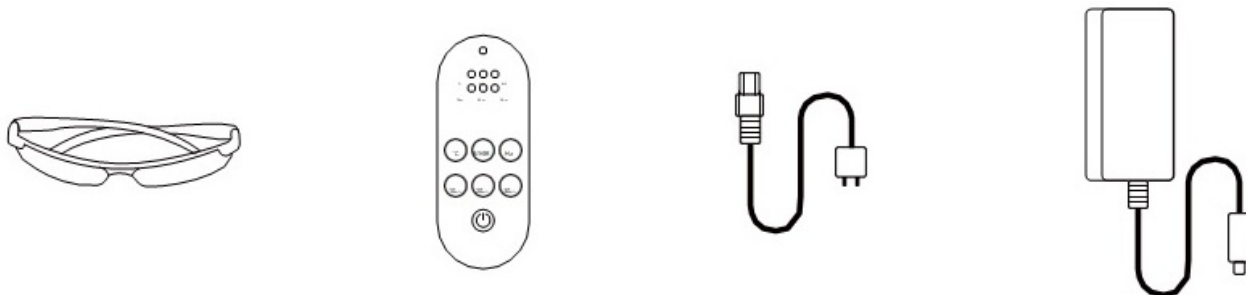

60180

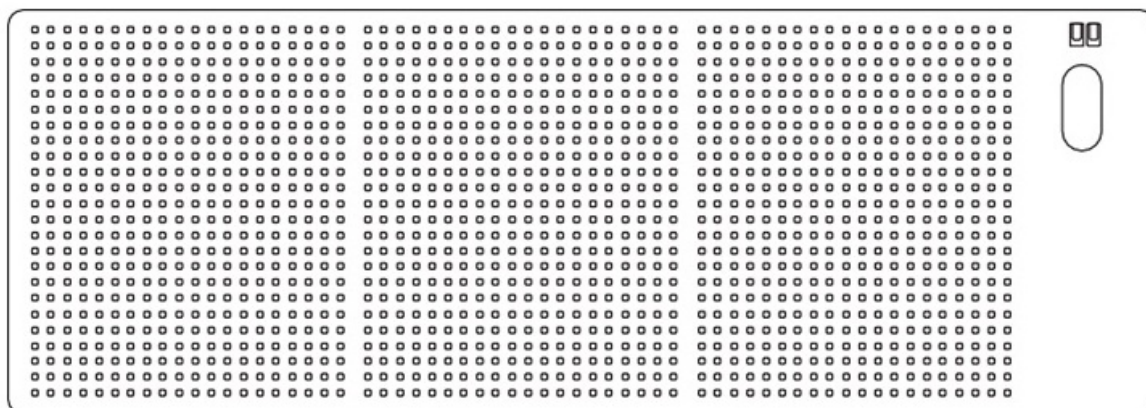

## Vědecky podložené výhody


Červené světlo s vlnovou délkou 660 nm působí na „elektrárnu“ v buňkách vašeho těla, která se nazývá mitochondrie. Ty dokáží absorbovat vlnové délky světla a jsou stimulované k efektivnější spolupráci s ostatními buňkami, například při obnově vaší pokožky, podpoře růstu nových buněk a zlepšení omlazení pokožky.

Infračervené záření s vlnovou délkou 850 nm má silnou propustnost a rovnoměrnou energii. Dokáže účinně působit na kožní tkáň, vytváří zevnitř sálavé teplo, napodobuje přirozené sluneční záření a rychleji zvyšuje vaši vnitřní teplotu. Při zvýšení tělesné teploty se otevřou drobné cévy, zrychlí se průtok krve alepší se krevní oběh. Mezitím se podpoří metabolismus. Tím se zvyšuje pružnost pokožky, opravuje se citlivá pokožka, dosahuje se omlazení pokožky, zmenšují se velké póry, zmírňuje se únava, zmírňují se bolesti svalů, zlepšuje se nespavost atd.

## Připojení

### Připojení

Používejte originální univerzální napájecí adaptér, který podporuje střídavý proud 100 V – 240 V a před zapojením do elektrické sítě připojte podložku, adaptér a napájecí kabel.

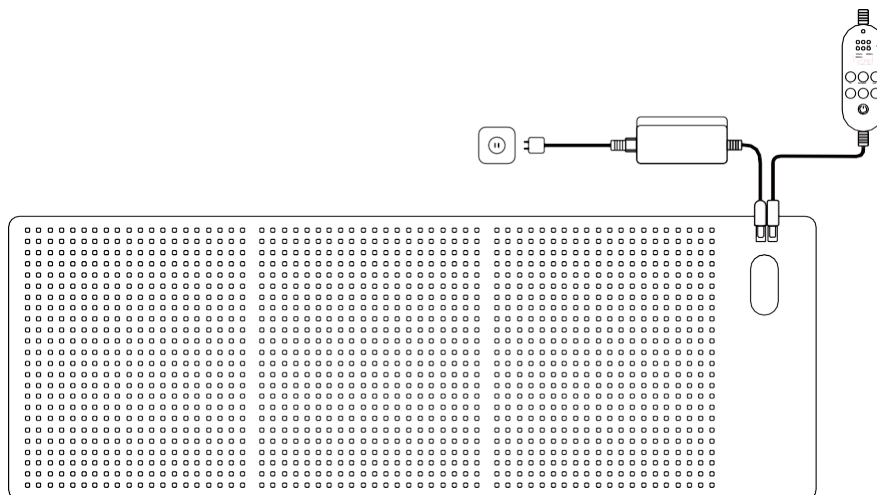

## Instrukce k ovladači





## Návod na používání a údržbu

1. 20 minut na jedno sezení, 1-2× denně na stejnou oblast v 6hodinových intervalech v trvání minimálně 8 týdnů.
2. Před a během používání vypijte trochu vody.
3. Pro dosažení lepších výsledků používejte podložku na holé tělo.
4. Po použití pás odpojte a uložte ho na chladné a suché místo.
5. Všechny LED diody jsou vodotěsné a na čištění povrchu je vhodné použít jemný navlhčený hadřík.

## Upozornění

1. NEPOUŽÍVEJTE V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH: Děti mladší 13 let, těhotenství a epilepsie, fotoalergie a užívání fotosenzibilizačních léků jako lithium, melatonin, fenotiazinová antipsychotika a některých antibiotik. Tomuto druhu léčby by se měli vyhnout také lidé s anamnézou rakoviny kůže, lidé necitliví na teplo a lidé se systémovým lupus erythematosus. Absolvovat světelnou terapii byste také neměli v případě, že užíváte steroidy a nebo kortizonové injekce.
2. Jedno ošetření stejné oblasti by nemělo přesáhnout 30 minut.
3. Uchovávejte mimo dosah vody a mimo vlhké prostředí.
4. Podložku neskládejte a nestlačujte, volně ji srolujte, abyste předešli poškození zabudované pružné desky s plošnými spoji. Nejlepší je podložku rozložit a uložit naplocho.

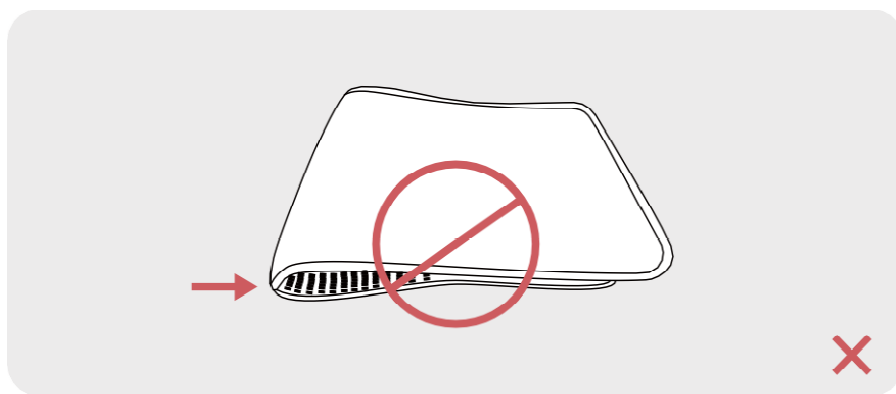

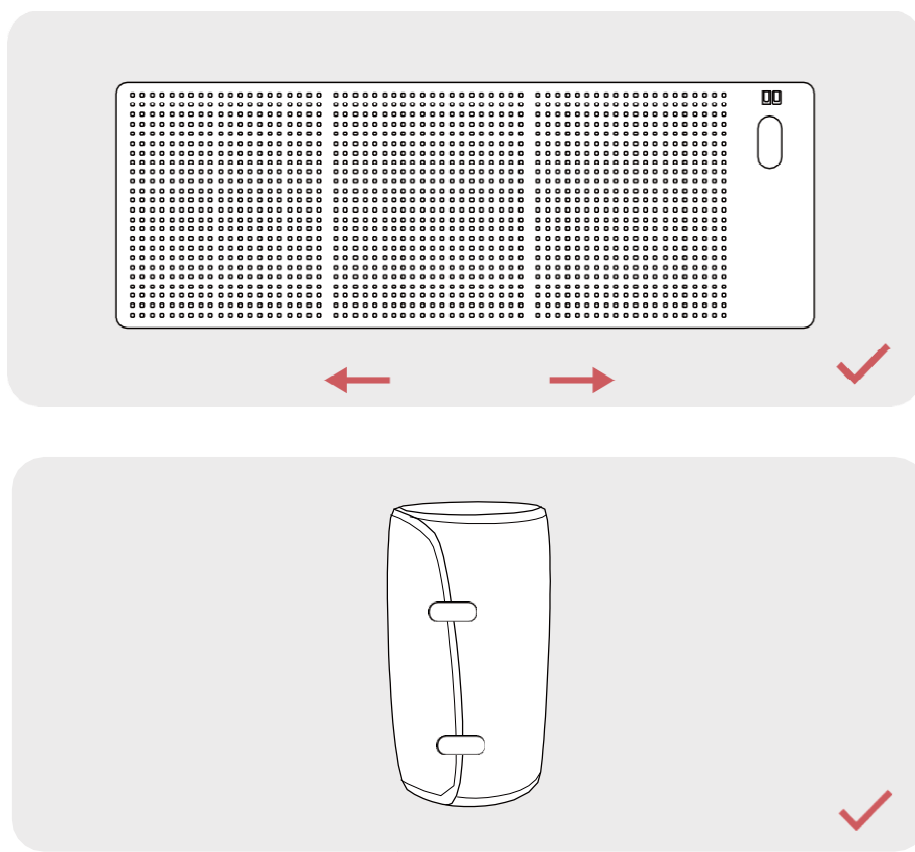

## **Záruka 1 rok**

Na všechny podložky s infračerveným světlem (IRL) zakoupené jako nové přímo od společnosti WELLDO, s.r.o. a nebo od autorizovaných prodejců se vztahuje záruka po dobu jednoho roku od data odeslání z výroby. Společnost WELLDO, s.r.o. zodpovídá za chyby produktu způsobené běžným používáním v rámci záruční doby a bezplatně je opraví a nebo vymění.

Společnost WELLDO, s.r.o. nezodpovídá za chyby a nebo poškození způsobené nesprávným používáním, náhodným a nebo úmyslným poškozením, zásahem vyšší moci a nebo v případě, že produkt byl upravený.

**Děkujeme !**